

《视知觉学习治疗软件》

使用说明书

【产品名称】

视知觉学习治疗软件

【型号】

RevitalVision

【发布版本】

V1

【完整版本】

V1.0.0

【注册人名称】

湖南德宝视科技有限公司

【注册人地址】

长沙市雨花区同升街道振华路 519 号聚合工业园 3 栋 303 号

【联系方式】

电话：

【售后服务单位】

湖南德宝视科技有限公司

联系方式：

【生产企业名称】

湖南德宝视科技有限公司

【生产地址】

长沙市雨花区同升街道振华路 519 号聚合工业园 3 栋 303 号

【联系方式】

【生产许可证编号】

湘药监械生产许 20220152 号

【注册证编号/产品技术要求编号】

湘械注准 20222210975

【产品结构组成】

产品由客户端、管理端和服务器组成，其中客户端由网络测试模块，网络信息接收/发送模块，人-机交互模块，训练信息采集模块共 4 个功能模块组成；管

理端由个人信息记录模块组成；服务器由云服务模块，训练信息分析模块，用户信息存储模块共 3 个功能模块组成。

【适用范围】

用于弱视儿童进行视觉功能的训练和治疗

【禁忌症】

伴有器质性眼科疾病的弱视患者慎用

【注意事项】

- 1、请在暗室进行训练，确保房间内除电脑屏幕外无其他光源。
- 2、训练者距离电脑屏幕为 1.5m 远
- 3、使用过程中，若出现视疲劳，可短暂休息，待双眼疲劳症状缓解后，继续训练。
- 4、软硬件及网络环境的要求

硬件：

台式、笔记本均可，配三键鼠标，左右键和中间滑轮键，可连接网络，具备声音，屏幕尺寸 15 英寸以上

软件：

Windows 7 （64 位）系统或以上

英特尔酷睿 i3 2120 或者更高

RAM 4G 或更高

磁盘容量 120G 或更高

谷歌浏览器（72 以上版本）

【说明书编制日期】

2021 年 12 月

【使用期限】

6 年

【安装说明】

一、登陆网站（<https://ttgood.cn/login>），进入登录页面。

针对大脑的训练，使您看得更清楚



The login page features a blue header with the text "针对大脑的训练，使您看得更清楚". Below the header is a "登录" (Login) button with a user icon. Underneath is a form with two input fields: the first contains the username "tt003" and the second contains masked characters "*****". A "登录" (Login) button is positioned below the password field. At the bottom, there is a "新用户?" (New User?) link and a "尝试免费演示版本" (Try Free Demo Version) button.

二、输入账号、密码，进入系统主页。



The system homepage has a blue header with the "REVITALVISION" logo and navigation links: "训练" (Training), "教学" (Teaching), "使用说明" (Usage Instructions), "关于" (About), and "联系" (Contact). A language dropdown menu is set to "Chinese". On the left, a sidebar shows the user "tt003" and navigation options: "我的训练" (My Training), "我的进展" (My Progress), and "校准" (Calibration). The main content area displays a welcome message "欢迎您, tt003,".

三、首次登录后，系统自动弹出校准信息，按照提示信息完成尺寸和亮度校准。



The calibration interface is divided into two sections: "屏幕尺寸校准" (Screen Size Calibration) and "亮度校准" (Brightness Calibration). The "屏幕尺寸校准" section includes instructions to adjust the screen width to 10 cm and height to 5 cm using a ruler. It features a blue bar for width adjustment and a red bar for height adjustment, both with a red arrow icon. Below these are "完成" (Complete) and "取消" (Cancel) buttons. The "亮度校准" section shows a grayscale calibration chart with two rows of numbers: "3 6 0 2 9 0" and "5 0 4 5 9 9". Below the chart are two input fields for the first and second rows of numbers, and a "确定" (Confirm) button.

【使用说明】

一、首次训练前请先认真观看教学视频。

RevitalVision 训练包含 4 种训练类型。请依次观看教学视频（共 4 个），并确保在训练前已充分了解训练方法！

二、点击我的训练，即可开始“训练”。训练类型交替出现，请认真按相应应答要求点击鼠标。

单图训练：屏幕闪烁两次，一次有 Gabor 视标，另一次没有。如第一次闪烁出现视标则点鼠标左键；第二次出现则点击右键。



左：包含 Gabor 视标的图像



右：不含 Gabor 视标的图像

三图训练：屏幕闪烁两次，一次有 3 个 Gabor 视标，另一次只有 2 个 Gabor 视标。如第一次闪烁出现 3 个 Gabor 视标，点击左键；如第二次出现则点击右键。




左：包含 3 个 Gabor 视标的图像




右：包含 2 个 Gabor 视标的图像

清晰图像训练：屏幕闪烁两次，两次均有 Gabor 视标，一次较清晰一些，一次较淡一些。清晰视标是第一次出现就点击左键；第二次出现就点击右键。

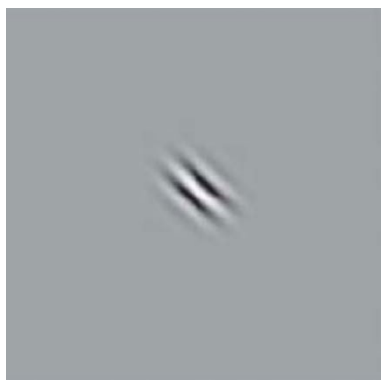


左：清晰 Gabor 视标的图像

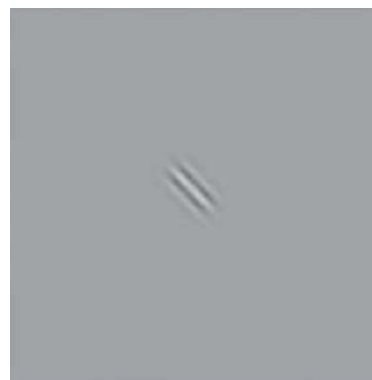

右：模糊 Gabor 视标的图像

移图训练：屏幕闪烁一次，出现 3 个 Gabor 视标，中间的视标可能往上、下、左、右任意一个方向偏移，如往左偏则点击左键；如往右偏则点击右键；上下偏

移时将鼠标逆时针横放，视标往上偏点击右键；视标往下偏点击左键，详情可参考以下图示：

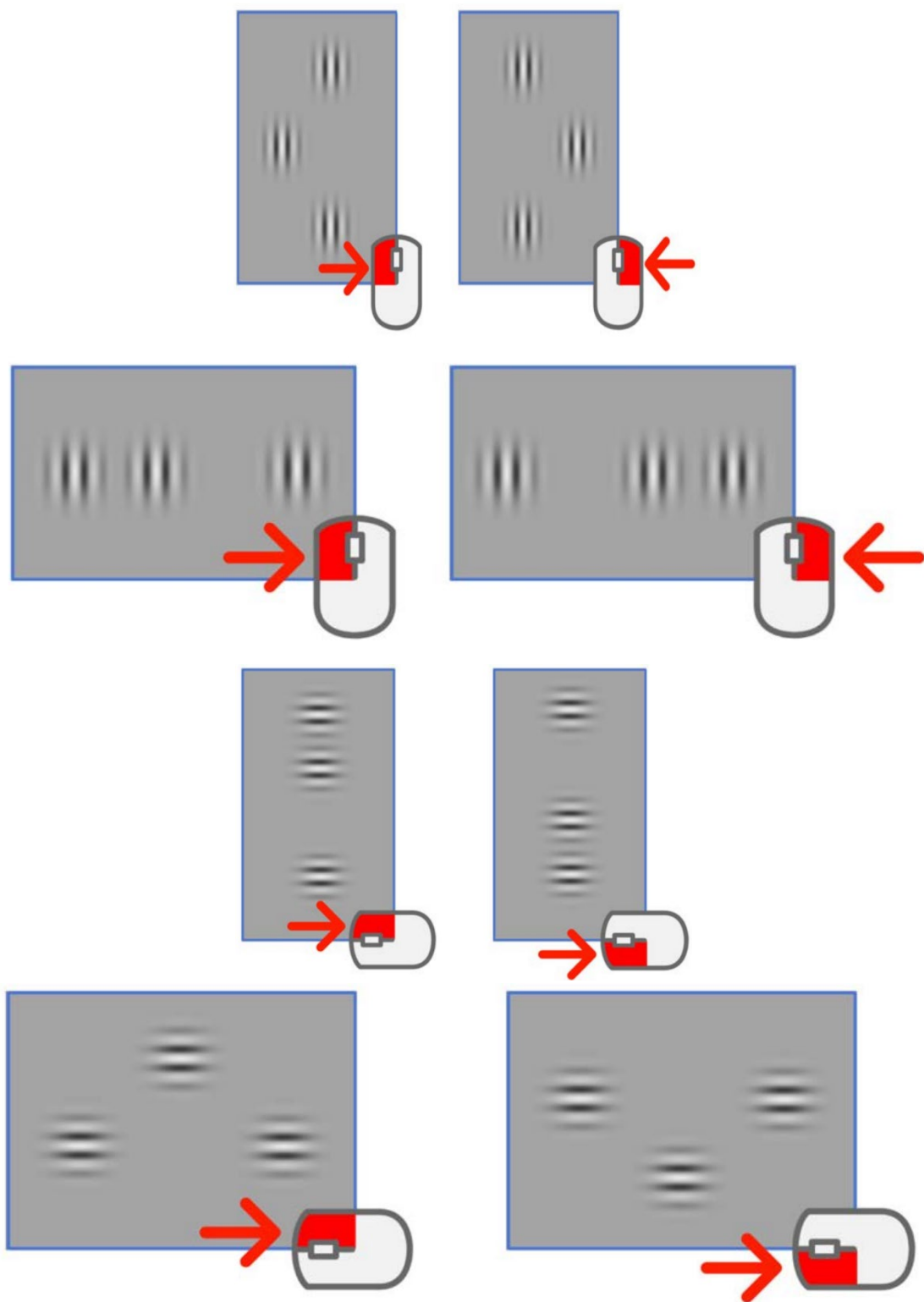

三、训练结束后，软件显示训练结果，点击“上传训练结果”。



四、下一次训练

将训练结果上传后,服务器算法根据用户的训练情况,自动调整下一次训练任务。
并在用户下一次训练时,下载到客户端电脑。

【储存方法】

产品以软件形式储存于服务器和网络。

【使用期限】

6 年

说明书修订日期: 2023 年 05 月